


MOTTO

SKOPI EXPRESS

Endoskopi Dijital Görüntü Aktarım ve Arşivleme Sistemi

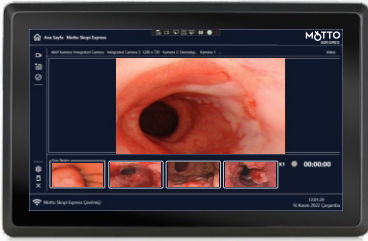

Motto Skopi Express

Endoskopi Dijital Görüntü Aktarım ve Arşivleme Sistemini

Yeniden Şekillendiriyor !




MOTTO

SKOPI EXPRESS

Endoskopi Dijital Görüntü Aktarım ve Arşivleme Sistemi

Motto Skopi Express; Dijital Görüntü Aktarım ve Arşivleme Sistemi, endoskopi işlemlerinin resim ve videolarını kayıt yaparak arşivleyen bir sistemdir.

Tıbbi görüntüleme, Video kaydetme, Raporlama ve bunların PACS sisteminde arşivlemesi için özel bir sistem olarak tasarlanmıştır.

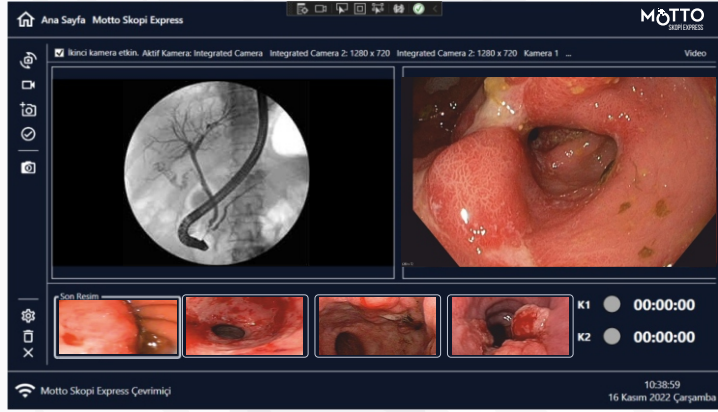

Endoskopi Kulelerinin taşıyıcı arabasına montaj yapılabilecek küçüklüktedir.

Ayaklığı ile taşıyıcı arabanın üzerine koyulabilir veya Hareketli yönlendirilebilir askı aparatı ile kullanım sağlanabilmektedir.

Endoskopi işlemi sırasında dokunmatik ekran, isteğe bağlı olarak Kablolü /Kablosuz ayak pedalı veya Endoskopun Üzerindeki Kamera Butonları ile görüntü ve video kaydı alınabilir..

Görüntüleme işlem odalarını farklı odalarda bulunan tüm bilgisayarlar, tablet ve akıllı telefonlardan canlı olarak izleyebilirsiniz

İşlemleri yine canlı yayın olarak hastane dışı ve şehir dışından da izlenmesi olanağı mevcuttur.

HD ve Full HD Görüntü alabilme özelliğine sahip olan Motto Skopi Express Sistemi Hastane Worklist ve Pacs Sistemi uyumludur.

Ayrıca A4 Formatında Rapor çıktısı alabilirsiniz.



MOTTO
YAZILIM

MOTTO

SKOPI EXPRESS

Endoskopi Dijital Görüntü Aktarım ve Arşivleme Sistemi

Motto Skopi Express Sistemi Endoskoplara taşıma arabalarının üzerine kolayca montaj yapılabilecek aparatlara sahiptir.

Wifi Özelliği sayesinde kablo kalabalığını ortadan kaldırmaktadır.



HBYS İş Listesi (Worklist) Entegrasyonu ile hasta seçimi ve işlem başlatılması basit ve kullanışlı bir hal almaktadır.

Sistem Online ve Offline Çalışma ortamlarına uygundur. Networkun olmadığı durumlarda sistem hasta kayıtlarını kendi üzerinde yapar ve Network bağlantısı olur olmaz servera otomatik olarak bu verileri gönderir.

Dolayısı ile Endoskopi kulesinin acil durumlarda taşınması sorun olmaz. Kule ile birlikte bilgisayarları taşımak zorunda kalmazsınız ya da network bağlantısı aramadan işleminizi her yerden yapabilirsiniz.

Hastanede tüm işlem odalarında çekilen görüntüler tek bir server da arşivlenir ve herhangi bir bilgisayardan hasta kayıtlarına basit bir şekilde ulaşılabilir. İstenilen bilgisayardan rapor yazılabilir, ya da rapor çıktıları alınabilir.



Motto Skopi Express Sistemini Kullanabileceğiniz Bölümler

1. KBB
2. LAPAROSKOPIK CERRAHİ
3. GASTROENTEROLOJİ
4. SİSTOSKOPI
5. HİSTEROSKOPI
6. BRONKOSKOPI

Motto Skopi yazılımı hastanede var olan tüm marka ve model görüntüleme cihazları ile sorunsuz şekilde çalışabilmektedir. Ayrıca Motto Skopi yazılımını tercih etmeniz durumunda geçmişte kullandığınız yazılımınızdaki hasta kayıtları Motto Skopi ürünü içerisine aktarımı yapılacaktır. Veri kayıplarınız bu sayede engellenecektir.

MOTTO
YAZILIM

Motto Skopi Express Sisteminin Özellikleri ve Faydaları

- ▶ Kullanıcı dostu
- ▶ ERCP ve EUS gibi çift cihaz görüntüleme desteği
- ▶ Detaylı hasta arama sistemi. Birden fazla işlem yapılmış hastaların, tarih tarih görüntülenmesi.
- ▶ Hastalarda görünen bulgu tipine göre arama sistemi
- ▶ Raporlama arayüzü
- ▶ Video Kayıt MPEG 4, AVI, H264 formatları desteği ve Video ayırma sistemi ile ayrılan bu videoların birleştirilmesi
- ▶ Hasta işlem dosyalarını farklı yerlere kaydetme özelliği (Ağdaki PC, DVD,CD, Flash Bellek External HDD gibi.)
- ▶ WorkList (İş Listesi) entegrasyonu
- ▶ PACS entegrasyonu
- ▶ Veritabanı paylaşım sistemi. (Tüm cihazlardan alınan tıbbi görüntülerin tek bir veritabanında arşivlenmesi ve paylaşılması)
- ▶ PACS entegrasyonu
- ▶ Dokunmatik Ekran özelliği
- ▶ Kablosuz Mouse/Klavye bağlanabilir.
- ▶ Network bağlantısı olmadan işlem yapabilme özelliği
- ▶ Hastanedeki Farklı doktor odalarından işlem odalarının canlı izlenebilmesi
- ▶ Uzak noktalara Hastane dışı ve Şehirler arası canlı yayın yapılabilmesi
- ▶ 7.2" Dokunmatik Renkli Ekran
- ▶ 12 V DC – 220 V 50/60 Hz (AC) voltaj girişi
- ▶ Cihaz Input Bağlantıları Endoskop sisteminin görüntü aktarım şekline göre yapılandırılabilir. (S-video, HDMI, Composite, VGA, DVI)

		T.C. MUĞLASITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Endosonografi	
HASTA NO :	2018082712023	İSTEYEN DOKTOR :	
PROTOKOL NO :		İSTEM TARİHİ :	29.08.2018 18:42:49
ADI SOYADI :		SONUÇ TARİHİ :	29.08.2018 18:42:49
CİNSİYETİ / YAŞI :	/ 0	SIRA NO :	51
İSTEK NEDENİ :			



ÖZOFAGOSKOPİ
Boğazın lokal anesteziinden sonra panendoskop yutturuldu. Özofagus normal görüldüğü ileriye. Duvar ve mukozası normal. Polip, kitle, ülser, divertikül, varis izlenmedi. Kardio-özofageal bileşke 38 cm'de ve fonksiyonları gevşek izlendi.

GASTROSKOPİ
İlidede safra, taze veya sindirilmiş kan, gıda artığı yok. Mide normotonik ve normokinetik görünümde. Mide fundus varisleri yok. Fundus duvar ve mukozası normal. Corpus duvar ve mukozası normal. Antrum, angulus duvar ve mukozasında yaygın eritem ve hiperemik alanlar ile pilor komsuluğunda mamiller yapılar izlendi. Pilor halkası deforme değil ve fonksiyonları normal. Prepylorik antrumdan ve corpusdan CLO test için biopsi alındı. Çadır işareti (+), kanama kontrolü yapıldı.

DUODENOSKOPİ
Bulbus duvar ve mukozası normal. Aktif ülser ve deformeite görüldü. Post bulber duodenum normal. Papilla normal anatomik yapıdaydı.

CLO test : pozitif , negatif

Biopsi alınan yerler : antrum

TANI : KARDİYA GEVŞEKLİĞİ, ANTRAL MAMİLLER GASTRİT

İŞLEME GERÇEKLEŞTİREN EKİP

MOTTO YAZILIM (HER MUAYENE RAPORUNUZU GETİRMENİZ RİCA OLUNUR.) **MOTTO** SKOPI

Rapor şablonları sabit bir yapıda olmayıp, dinamik bir yapıya sahiptir. Kurumun istediği şekilde tasarlanarak sisteme aktarılabilir.